

# ControlCARE 04

*Materac piankowy trzywarstwowy*

PRZEZNACZONY DO PROFILAKTYKI ODLEŻYN IV STOPNIA



OEKO  
TEX®

**Materac ControlCARE 04 przeznaczony jest do profilaktyki odleżyn IV stopnia.**

Warstwowa budowa pozwala równomiernie rozłożyć nacisk ciała, co ma ogromne znaczenie w profilaktyce odleżyn. Zastosowane materiały i rozwiązania znacząco wpływają na komfort leżenia, poprawiają jakość snu oraz wspierają procesy regeneracyjne u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

- Wkład z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej HR.
- Trzywarstwowa budowa rdzenia materaca, w której każda z warstw cechuje się inną gęstością.
- Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny; wykonany z antyalergicznego, nieprzemakalnego i paroprzepuszczalnego materiału
- Możliwość czyszczenia w Autoklawie.
- Temperatura czyszczenia na mokro - 95°
- Max. dopuszczalne obciążenie - 150kg
- Dwa lata gwarancji
- **Ważne! Materac dedykowany do łóżek z regulowanym stelażem**



# ControlCARE 04

Materac piankowy trzywarstwowy


PRZEZNACZONY DO PROFILAKTYKI ODLEŻYN IV STOPNIA

## Kanały napowietrzające

System podłużnych kanałów napowietrzających zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza - rozwiązanie mające ogromne znaczenie w profilaktyce odleżyn.

## Pokrowiec PU 180g/m<sup>2</sup>

zapinany na zamek błyskawiczny, zdejmowalny wodoodporny oddychający odporny na bakterie i grzyby ogniodporny posiada certyfikat OEKO-TEX

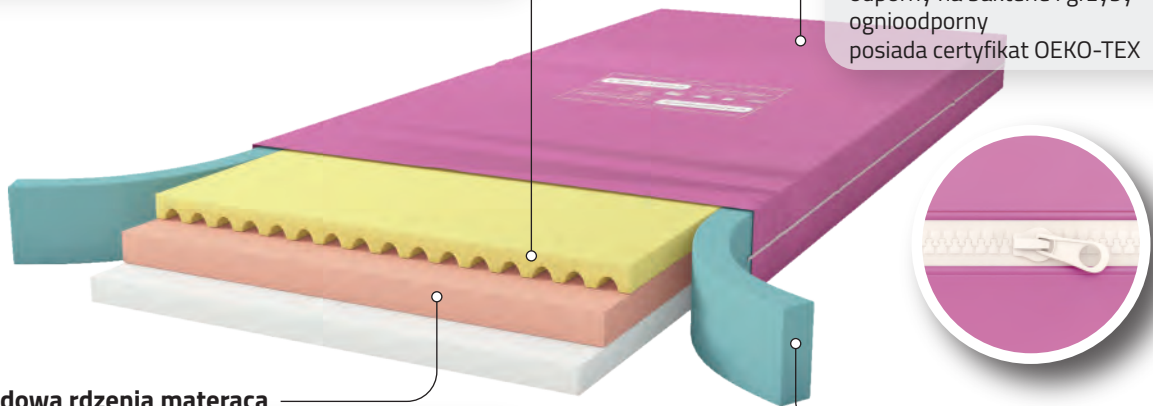

## Warstwowa budowa rdzenia materaca

Rdzeń materaca składa się z trzech warstw, z których każda charakteryzuje się inną gęstością.

**Górna warstwa** rozkłada nacisk i zmniejsza ryzyko odleżyn  
**Środkowa warstwa** odpowiada za stabilność oraz ochronę przed zapadaniem się ciała.

**Dolna warstwa** wpływa na trwałość materaca oraz utrzymanie jego formy.

## Brzeży materaca

Solidne brzeży materaca wykonane z pianki o zwiększonej gęstości zapewniają większą stabilność oraz ułatwiają pacjentowi wstawanie oraz siadanie.

## Dostępne rozmiary


Szerokość	Długość	Wysokość
80cm	190cm	15cm
90cm	200cm	15cm
110cm	200cm	15cm
120cm	200cm	15cm

\*Istnieje możliwość zamówienia materaca na wymiar, jednakże czas realizacji zamówienia w takim przypadku jest wydłużony.

OEKO  
TEX®

2

LATA  
GWARANCJI

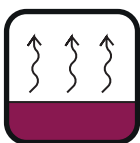

Oddychający



Wodoodporny




Ogniodporny




Pokrowiec odporny na bakterie i wirusy




Max. obciążenie

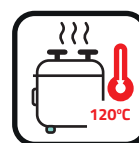

Możliwość czyszczenia w Autoklawie

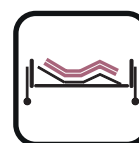

Dedykowany do łóżek z regulowanym stelażem

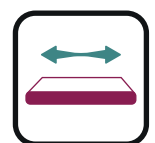

Wytrzymały na rozciąganie



REHA-BED Sp. z o.o.  
ul. Spacerowa 1,  
41-253 Czeladź



+48 32 346 00 33



biuro@rehabed.com.pl

www.rehabed.pl